


> Innovative Produkte,
die Menschen helfen.

reha medi
Hoffmann GmbH

Mobilizer® Norbert



Mehr entdecken

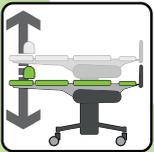

> Ergonomisch, sicher
und komfortabel



 entwickelt, gestaltet, produziert.
made in Germany



> Produktvideo auf:
www.frühmobilisation.com

www.rehamedi.de



Produktmerkmale

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden reduziert und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine optionale Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt: Der Patient ist auf Augenhöhe mit seiner Umgebung.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und

ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen, auch für immobile Patienten. Ihnen steht eine vielfältige Farbauswahl zur Verfügung.

Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich. Dies ist besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz.

Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl.

> Gerne beraten wir Sie!

Ausstattungsoptionen Beispiele



Art.-Nr. 6040106
Bezeichnung Kopfstütze fixierend

Art.-Nr. 6040116
Bezeichnung Positionierungspolster

Art.-Nr. 7040115
Bezeichnung Beingurt

Art.-Nr. 6040110
Bezeichnung Thoraxgurt

Art.-Nr. 6040109
Bezeichnung Beckengurt

Art.-Nr. 6040107
Bezeichnung Wadengurt

Standardfarben



> Technische Daten

Liegehöhe einstellbar	58 - 80 cm
Länge der Liegefläche	190 cm
Sitzbreite	57 cm
Gesamtbreite	74 cm
leichtgängige Laufräder	Ø 150 mm
Eigengewicht	ca. 90 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	250 kg

> Verbreiterte Ausführung

Sitzbreite	65 cm
------------------	-------

> Farbauswahl

