


> Innovative Produkte,
die Menschen helfen.

reha medi
Hoffmann GmbH

Mobilizer® Ottfried



Mehr entdecken

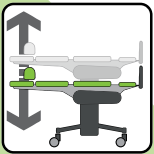

> Ergonomisch, sicher
und komfortabel



 entwickelt, gestaltet, produziert.
made in Germany



> Produktvideo auf:
www.frühmobilisation.com

www.rehamedi.de



Produktmerkmale

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden reduziert und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine elektrische Höhenverstellung gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt: Der Patient ist auf Augenhöhe mit seiner Umgebung. Die stufenlose Verstellung der Sitzneigung ermöglicht es, Patienten so zu positionieren, dass erhöhter Bandscheibendruck und Fußsohlenkontakt die Förderung der Vigilanz unterstützen. Die Vielseitigkeit des Mobilizer® Ottfried unterstützen Pflegende und Therapeuten unter anderem beim Delirmanagement und der Atmungstherapie.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen, auch für immobile Patienten. Ihnen steht eine vielfältige Farbauswahl zur Verfügung.

Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich. Dies ist besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz. Die in jeder Position arretierbaren Armlehnen ermöglichen die Nutzung des Therapietisches in jeder therapeutischen Sitzposition.

Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl.

Ausstattungsoptionen Beispiele

> Gerne beraten wir Sie!



Art.-Nr.	6040106	6040116	7040115	6040110	6040109	6040107
Bezeichnung	Kopfstütze fixierend	Positionierungspolster	Beingurt	Thoraxgurt	Beckengurt	Wadengurt

Standardfarben



> Farbauswahl



> Technische Daten

Einsitzweite.....	60 cm
Gesamtbreite.....	74 cm
leichtgängige Laufräder.....	Ø 150 mm
Eigengewicht.....	ca. 90 kg
höchstzulässiges Patientengewicht.....	250 kg

> Verbreiterte Ausführung

Sitzbreite.....	68 cm
Gesamtbreite.....	80 cm